

ACE steri[®] エースステリ

滅菌ロールバッグ

蒸気滅菌、EO ガス滅菌、ホルマリン滅菌共用タイプ




EN868-1、EN-868-3、EN868-6 の規格適合品

機能特長

- シールのムラや破損を見分けやすいブルーのフィルムを使用しています。
- ケミカルインジケータの色の変化によって滅菌済であることが分かります。
- ケミカルインジケータのインクはフィルムとの間に印刷されているため、従来品の様なインジケータインクの滅菌物への付着は解消。
- 滅菌処理時の圧力に耐える高強度設定です。
- 蒸気、ガスの透過性を持った他孔質構造医用透析紙を使用しています。
- 滅菌後の細菌の侵入防ぎ、長期間無菌状態を保持できます。
- 3種類の滅菌法(蒸気滅菌、EO ガス滅菌、ホルマリン滅菌)に対応します。

滅菌後ケミカルインジケーター色調変化

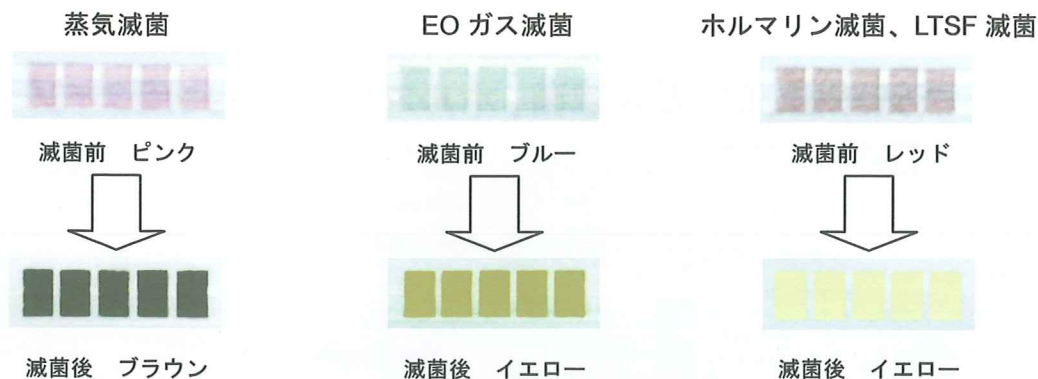

材質

医用透析紙 : BILLERUD (SKARBLACKA, Sweden)

EN868-1、EN868-3、EN868-6 の規格適合

フィルム : 12µm PET (ポリエチレン) と 45µm CPP (無延伸ポリプロピレン) の二層構造

使用方法

必要な長さのエースステリをカットして、一端をヒートシールします。被滅菌物を挿入し、次いで他端をヒートシールして滅菌を行ってください。

製品価格リスト

品番	幅×長さ	単価	1c/s 入目	c/s 価格
H7100	100mm×200m	¥9,800	4 巻	¥39,200
H7150	150mm×200m	¥14,800	4 巻	¥59,200
H7200	200mm×200m	¥18,800	4 巻	¥75,200
H7250	250mm×200m	¥22,400	2 巻	¥44,800
H7300	300mm×200m	¥29,400	2 巻	¥58,800

※消費税別途